


# INSTRUKCJA APLIKACJI SZCZEPIONKI DONOSOWEJ<sup>1</sup>

## SPRAWDŹ SZCZEPIONKĘ:

- Zawiesina powinna być bezbarwna do jasnożółtej
- Przejroczysta lub opalizująca
- Mogą występować małe białe cząstki

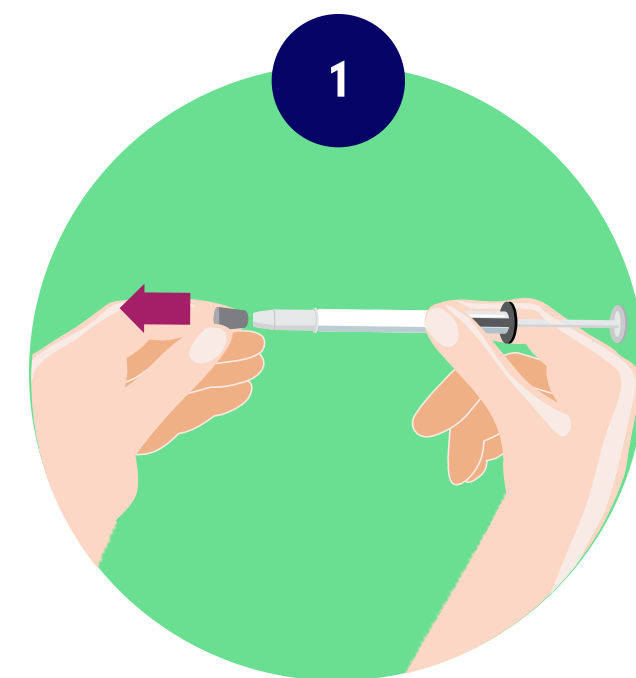


### 1 Przygotuj aplikator, usuwając gumową osłonę końcówki

Nie zdejmuj zacisku dzielnika dawki na drugim końcu aplikatora. To dzieli dawkę 0,2 ml tak, że równa ilość 0,1 ml może być dostarczona do obu nozdrzy




### 2 Ustaw aplikator

Pacjent powinien być w pozycji pionowej. Umieść końcówkę płytko w nozdrzu, aby upewnić się, że produkt dostanie się do nosa.

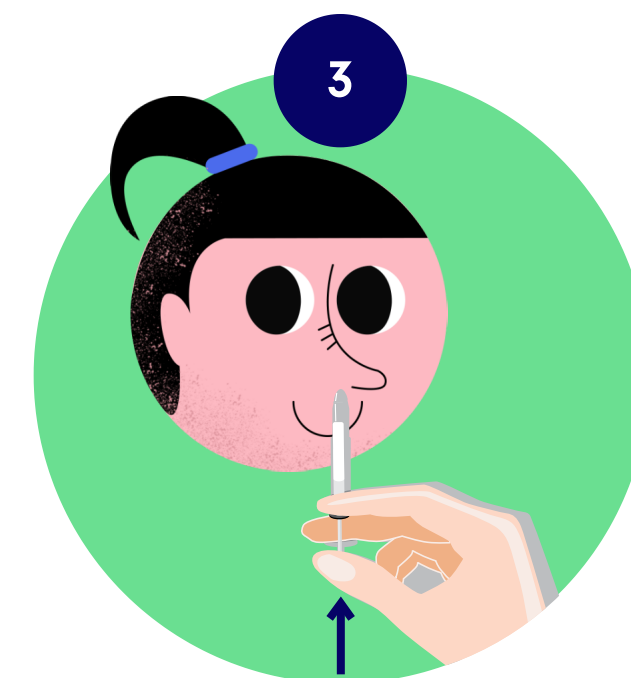


### 3 Naciśnij tłok

Jednym ruchem jak najszybciej naciśnij tłok, aż zacisk separatora dawki uniemożliwi dalszy nacisk.

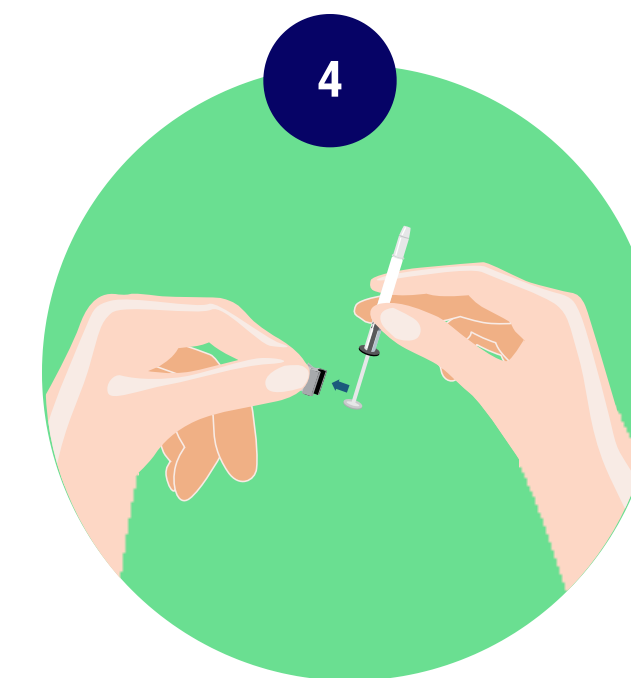

### 4 Usuń zacisk separatora dawki

W celu podania do drugiego nozdrza ściśnij i usuń zacisk separatora dawki z tłoka.

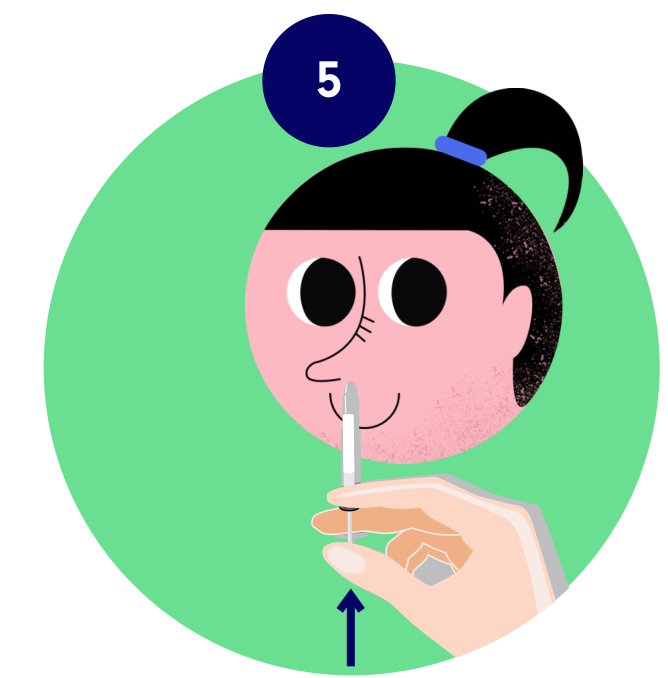

### 5 Rozpyl do drugiego nozdrza

Umieść końcówkę płytko w drugim nozdrzu i jednym ruchem naciśnij jak najszybciej tłok w celu podania pozostałej szczepionki.